



huka

MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIJ!

DRIEWIELFIETS CITY

De sportieve & stijlvolle stadsfiets

Een lichtgewicht fiets die zorgt voor stabiliteit

De driewieler City ziet eruit als een gewone fiets. De fiets is ontwikkeld voor gebruikers die behoefte hebben aan meer stabiliteit en extra veiligheid. Het maakt je mobiel en onafhankelijk. De City is een licht lopende en betrouwbare driewieler die geschikt is voor veelvuldig gebruik. Tevens is de driewieler geheel naar jouw wensen en omstandigheden af te stemmen. Zo kan de fiets in elke gewenste RAL kleur geleverd worden en zijn er diverse accessoires leverbaar waarmee je jouw fiets nóg persoonlijker kan maken.

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo is de fiets licht in gewicht, licht sturend, is het eenvoudig om op- en af te stappen. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de fiets gemakkelijk te onderhouden is.

De driewieler City is standaard voorzien van o.a. trommelremmen, een grotendeels gesloten moderne kettingkast en een veiligheidsslot (AXA solid).

- ✔ Leverbaar met elektrische ondersteuning, waardoor je nóg lichter kan trappen.
- ✔ Korte bochten, zowel linksom als rechtsom zijn eenvoudig te maken.
- ✔ Voorzien van een roestwerend frame dat stootvast en weerbestendig is.
- ✔ Extra opties zijn mogelijk om nog meer stabiliteit te realiseren, zoals een heupsteun, rugsteun of voetfixaties.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de vork.

Elektro ondersteuning

De City is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, drie rijnsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Daarnaast is de City ook uitvoerbaar met AutoVario. Hiermee kan er zonder te trappen elektrisch gereden worden. De snelheid van het fietsen wordt gedoseerd via het gashandvat.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals heupsteunen, een rugsteun, voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets.

Accessoires & opties

De City is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Wil je een terugtraprem, handremmen, een terugtrapautomaat of een 8 versnellingsnaaf?


Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De driewieler City wordt standaard geleverd in de volgende kleuren:

- wit/ oranje (RAL9016/ RAL2004)
- zilver metallic/ mat antraciet grijs (RAL9006/ RAL7016)
- rood metallic/ zilver metallic (RAL9006)

Jouw City nog persoonlijker maken? Dat kan! We kunnen de City voor jou in elke gewenste RAL kleur maken.

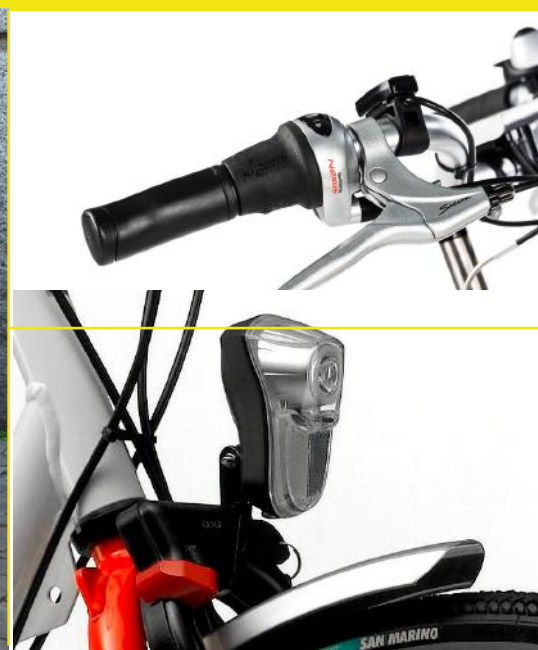

De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	City 22	City 24
Lengte in mm	1595	1680
Breedte in mm	685	750
Gewicht in kg	25	27
Cranklengte in mm	125	150
Binnenbeenlengte in mm	680 - 880	720 - 920
Instaplengte frame in mm	520	560
Instaphoogte frame in mm	305	320
Maximale belasting in kg	90	130
Bandenmaat voor in inch/ ETRTO	22 x 1,375/ 37-489	24 x 1,375/ 37-540
Bandenmaat achter in inch/ ETRTO	20 x 1,3/ 35-406	20 x 1,3/ 35-406

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders.

Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de City en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!