



huka

MAAK EEN
GRATIS
PROEFRIJ!

TANDEM COPILOT 3

Stabiel op- en afstappen met drie wielen

Extra veilig en stabiel met de passagier voorop

Zoek je een tandem die extra stabiel en veilig is voor bijvoorbeeld een beweglijke passagier of een passagier met evenwicht problemen? Ervaar de tandem Copilot 3, geschikt voor volwassenen en kinderen! Dankzij het derde wiel kunnen beide berijders ook blijven zitten als de tandem stilstaat. Bij deze tandem kan alleen de begeleider sturen en heeft de passagier een stuur voor houvast. De Copilot 3 is daarnaast te personaliseren aan specifieke voorkeuren en wensen. Het is tandem om samen van het fietsen te genieten zonder zorgen over veiligheid!

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo zit de begeleider hoger dan de passagier om een goed overzicht over het verkeer te houden. Daarnaast kan je met de Copilot 3 eenvoudig op- en af te stappen. De verlichting zorgt ervoor dat je goed ziet en gezien wordt.

De tandem Copilot 3 is standaard voorzien van o.a. een lage instap, licht bedienbare handremmen, een grotendeels gesloten moderne kettingkast en een AXA kabelslot.

- ✔ Leverbaar met elektrische ondersteuning, waardoor je nóg lichter kunt trappen.
- ✔ De begeleider bepaald via de inschakelbare vrijloop of de passagier mee kan trappen. Met de gewone vrijloop bepaald de passagier dit zelf.
- ✔ Het voorframe is afneembaar, waardoor je de fiets compacter kunt stallen.
- ✔ Om de optimale rijpositie te realiseren zijn zowel de zadels als sturen in hoogte- en hoek instelbaar.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de vork.

Elektro ondersteuning

De Copilot 3 is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, drie rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals

heupsteunen, rompsteunen, voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op jouw fiets. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties


De Copilot 3 is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een aangepast zadel, stuur of pedalen. Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De tandem Copilot 3-24 (begeleider met kind voorop, vanaf 4 jaar) is leverbaar in het metallic blauw, wit (RAL9016) en parel donkergrijs (RAL9023).

De tandem Copilot 3-26 (begeleider met volwassenen voorop) is leverbaar in het metallic rood, wit (RAL9016) en parel donkergrijs (RAL9023).

Eventuele andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

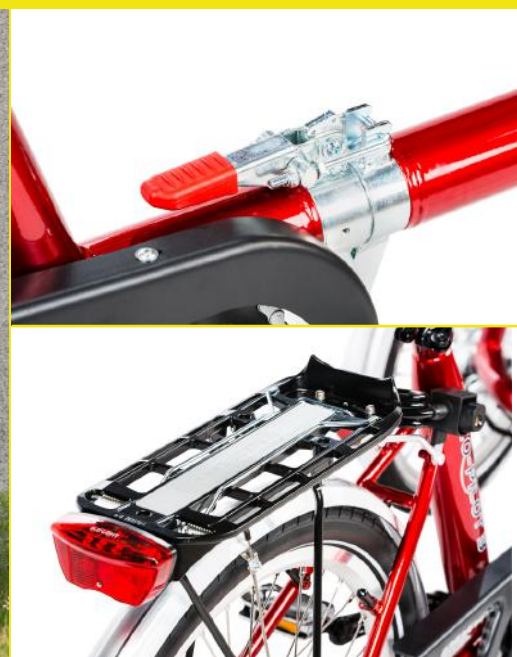

De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Copilot 3-24		Copilot 3-26	
	voor	achter	voor	achter
Lengte in mm	2000		2150	
Breedte in mm	890	890	890	890
Gewicht in kg	30		31	
Cranklengte in mm	150	170	150	170
Binnenbeenlengte in mm	550-710	730-940	720-970	720-970
Binnenbeenlengte in mm*	640-780	730-940	n.v.t.	n.v.t.
Maximale belasting in kg	180		180	
Bandenmaat ETRTO	47-406	47-507	47-406	47-509
Versnellingen	8 versnellingen terugtraprem (Shimano Nexus)			

*hogere voorbouw

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders.

Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Copilot 3 en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!