



**huka**

MAAK EEN  
GRATIS  
PROEFRIJ!

## ROLSTOELFIETS DUET & DUET JUNIOR Fiets & rolstoel ineen

### Perfect samen eropuit in de buitenlucht

De rolstoelfiets Duet is een unieke combi van een fiets en rolstoel ineen die we voor zowel volwassenen als kinderen ontwikkelen. De één fietst en de ander zit in de rolstoel aan de voorzijde. Dankzij het ontwerp gaat het trappen en sturen licht en soepel. Aangekomen waar je wilt zijn? Koppel de stoel eenvoudig af en het wordt een losse handbediende rolstoel. Heb je specifieke wensen voor de rolstoelfiets? Wij passen de rolstoelfiets geheel aan jouw omstandigheden aan. Het is een slimme oplossing in allerlei dagelijkse situaties!

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat jouw fiets voorzien is van de beste materialen en optimaal comfort. Zo heeft de rolstoelfiets stabiele rijeigenschappen, vanwege de parkeerrem en is het eenvoudig om op- en af te stappen.

De rolstoelfiets Duet is standaard voorzien van o.a. 3 versnellingen, dubbele trommelremmen, terugtraprem, parkeerrem, heupgordel voor de rolstoel en zitkussens.

- ✔ Leverbaar met elektrische ondersteuning, waardoor je nóg lichter kunt trappen.
- ✔ De ergonomisch gevormde stoel aan de voorzijde zorgt ervoor dat de passagier op een veilige en comfortabele manier zit.
- ✔ De stoel aan de voorzijde is aan te passen aan het postuur van de passagier. Tevens is de rugleuning in hoek verstelbaar, is de voetenplaat in hoogte- en hoek verstelbaar en naar de zijkant weg te klappen.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de vork.

## Elektro ondersteuning

De Duet is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt standaard met een aanrijhulp, drie rijnsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

## Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals zijkussens, waarmee

de zitdiepte- en breedte aangepast kan worden, leveren we maatwerk. De stoel wordt aangepast aan de gebruiker (volwassenen of kind). Heb je een orthese? Dan kan de zitschaal vervangen worden door de orthese. Jouw speciale behoefte is een uitdaging voor ons!

## Accessoires & opties

De Duet is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een hoofdsteen, spakenbedekking, vier punts-gordel of zitbroek.


Voor ons geen probleem! Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

## Kleuren

De Duet is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- zilvergrijs
- metallic rood
- metallic blauw

De stoel aan de voorzijde wordt geleverd in het geel met blauwe inlegkussens. Eventuele andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

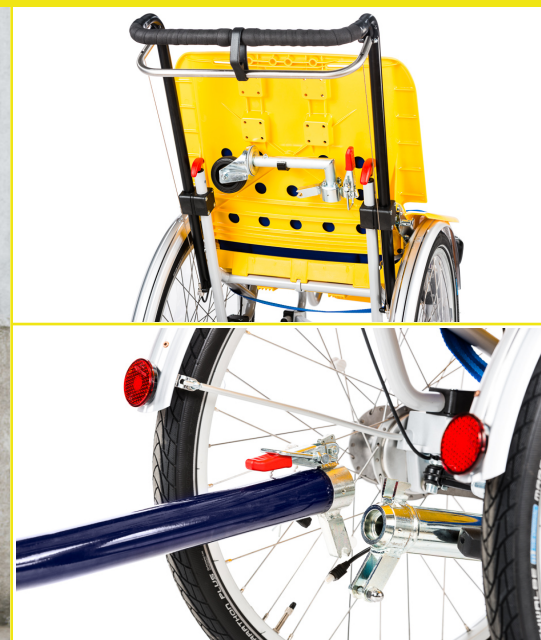

## De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	Fietsdeel	Rolstoeldeel
Cranklengte in mm	170	n.v.t.
Binnenbeenlengte in mm	780-930	n.v.t.
Bandenmaat achter in inch/ ERTRO	26 x 1,75 (47-559)	n.v.t.
Maximale belasting in kg	100	n.v.t.
Totale combinatie lengte x breedte in mm	2350 - 650	n.v.t.
Maximale totale belasting in kg	180	
Zitbreedte x zitdiepte in mm	n.v.t.	450 x 400
Onderbeenlengte in mm	n.v.t.	100 - 550
Rughoogte in mm	n.v.t.	550
Maximale belasting in kg	n.v.t.	100

## Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders. Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de Duet en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!