

The logo for Huka, featuring the word 'huka' in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are white and set against a yellow, trapezoidal background that tapers to the right.A yellow circular badge with the text 'MAAK EEN GRATIS PROEFRIJ!' in a bold, uppercase, sans-serif font. The text is black and centered within the circle.

AANGEPASTE KINDERFIETS AT-SERIE

Vrolijk & veilig voor kinderen

Speciaal ontwikkelde fiets voor kinderen

Ben je op zoek naar een kinderfiets die meer stabiliteit of ondersteuning biedt? Met de aangepaste AT fiets kan jouw kind lekker fietsen zonder moeite. Buiten spelen, op de fiets naar school en spelen met vriendjes? Het kan makkelijk! Tevens is de aangepaste kinderfiets geheel naar de wensen en omstandigheden van jouw kind af te stemmen. Zo kan de lichtgewicht fiets in alle hippe, stoere en vrolijke RAL kleuren geleverd worden en zijn er diverse accessoires waarmee je de fiets nóg persoonlijker en fraaier kan maken. De kinderen kunnen met plezier fietsen en hoeven verder nergens aan te denken!

We kijken naar individuele berijders en hun behoeften en willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Zodoende innoveren en optimaliseren wij onze fietsen continu, zodat onze kinderfietsen voorzien zijn van de beste materialen en optimaal comfort. We hebben twee types die speciaal zijn ontwikkeld voor twee leeftijdsgroepen, namelijk de AT-A (tot en met ongeveer 5 jaar) en de AT-B fiets (vanaf ongeveer 5 jaar tot en met 9 jaar).

De AT fiets is standaard voorzien van o.a. een gesloten moderne kettingkast, licht bedienbare Rollerbrake handremmen en een lage- en brede opstaplaat. De AT-B is tevens voorzien van verlichting en een veiligheidsslot (AXA solid).

- ✔ Veilig op- en afstappen, vanwege de driewielconstructie en het lage zwaartepunt.
- ✔ Lichtlopende fietsen met een stabiele wegligging.
- ✔ Individueel aanpasbaar met diverse ondersteuning en accessoires.
- ✔ Vrolijk en kindvriendelijk gestyled.
- ✔ 10 jaar garantie op het frame en de voorvork. (na registratie)*

* Registreer jouw Huka fiets eenmalig via www.huka.nl/garantie en krijg 10 jaar garantie. Standaard krijg je 5 jaar garantie op jouw Huka fiets.

Elektro ondersteuning

De ATB is met een hulpmotor (PASvario) verkrijgbaar. Met behulp van deze aandrijving is het lichter trappen en dus minder vermoeiend. Deze geruisloze trapondersteuning wordt met drie rijsnelheid instellingen en een overzichtelijk display geleverd.

Ondersteuning & speciale aanpassingen

Naast de extra ondersteuning die we kunnen bieden zoals een duwstang, heupsteunen,

rompsteunen, een rugsteun, voetfixaties etc. leveren we maatwerk. Zodoende kunnen we specifieke aanpassingen doorvoeren op de kinderfiets. Speciale behoeften zijn een uitdaging voor ons!

Accessoires & opties


De AT is uit te breiden met diverse accessoires en opties. Denk hierbij aan een ander zadel, stuur of pedalen. Bekijk de mogelijkheden via onze website of informeer via jouw leverancier.

Kleuren

De driewieler AT-A wordt standaard geleverd in het lichtblauw (RAL5024). De driewieler AT-B wordt standaard geleverd in de volgende kleuren:

- felblauw (RAL5015)
- roze (RAL3014)

De AT nog persoonlijker maken met bijvoorbeeld de lievelingskleuren van jouw kind? Dat kan! We kunnen de AT kinderfiets in elke hippe, stoere en/ of vrolijke RAL kleur maken.

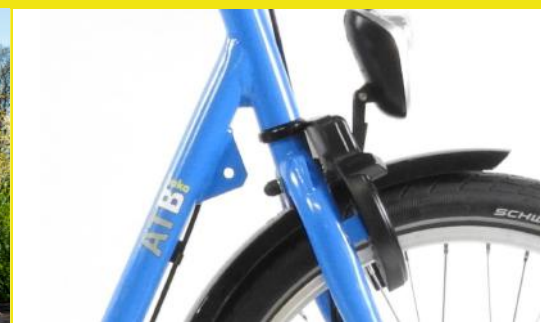

De 10 belangrijkste specificaties

Technische specificaties	ATA	ATB
Lengte in mm	1120	1350
Breedte in mm	490	625
Gewicht in kg	17	24
Cranklengte in mm	90	110
Binnenbeenlengte in mm	380-490	470-650
Instaplengte frame in mm	300	340
Instaphoogte frame in mm	145	255
Maximale belasting in kg	40	60
Bandenmaat voor inch / ETRTO	16 x 1,75/ 47-305	20x 1,3/ 35-406
Bandenmaat achter inch / ETRTO	12 x 1,95/ 54-203	16 x 1,75/ 47-305

Over Huka

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en produceren we al meer dan 40 jaar fietsen die het verschil maken in de wereld van de berijders.

Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid is onze passie. Met een betrokken team leveren we een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen naar Dutch design. Meer weten over de AT kinderfiets en ons assortiment? Bel ons of bekijk onze website!